


VISITE NOSSO SITE
www.dellab.com.br

DEL LAB

Colorímetro Visual Modelo DLNH-100

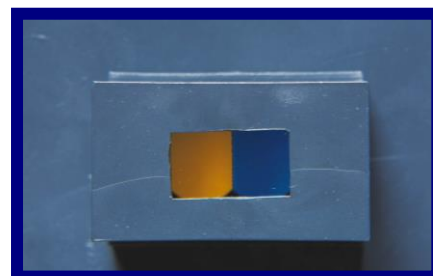

**EXCLUSIVO PRISMA
ÓTICO PARA JUNÇÃO
DE IMAGENS
PROPORCIONANDO UMA
LEITURA MAIS PRECISA
DOS RESULTADOS**

**Metodologia analítica de
acordo com as normas
técnicas nacionais e
internacionais, tais como:
ABNT - APHA - AWWA -
STANDARD METHODS, etc.**

Instrumento que propicia análise precisas e rápidas, para a determinação de: FLUORETOS, COR NATURAL DE ÁGUA, ALUMÍNIO, FERRO, MANGANÊS, NITROGÊNIO, etc; utilizando-se os discos colorimétricos adequados a cada parâmetro. Construído em robusto gabinete de metal fosfatizado, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática texturizada.

Possui: Base com fonte luminosa fluorescente. Filtro policromático para homogeneização de luz, proporcionando luminosidade equivalente à luz do dia. Porta discos na parte superior. Porta tubos de Nessler. Prisma óptico de junção de imagem, proporcionando amplo campo visual. Interruptor liga/desliga de ação intermitente. 110 ou 220 V (a especificar).

Acompanha: 2 Tubos de Nessler com percurso óptico de 200 mm. 2 Mergulhadores (Plungers).

DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA

Rua Profª. Ergília Micelli nº 541 Araraquara – SP.CEP: 14808 – 110
Fone/ Fax: (16) 3322.7020 e-mail: dellab@dellab.com.br